



道鹏生物
× IP BioMed

外泌体NTA检测服务


NANOPARTICLE TRACKING ANALYSIS SERVICE

粒径 | 浓度 | 电位

国内 **首家** 外泌体NTA检测服务，最快 **当天** 出报告



服务优势

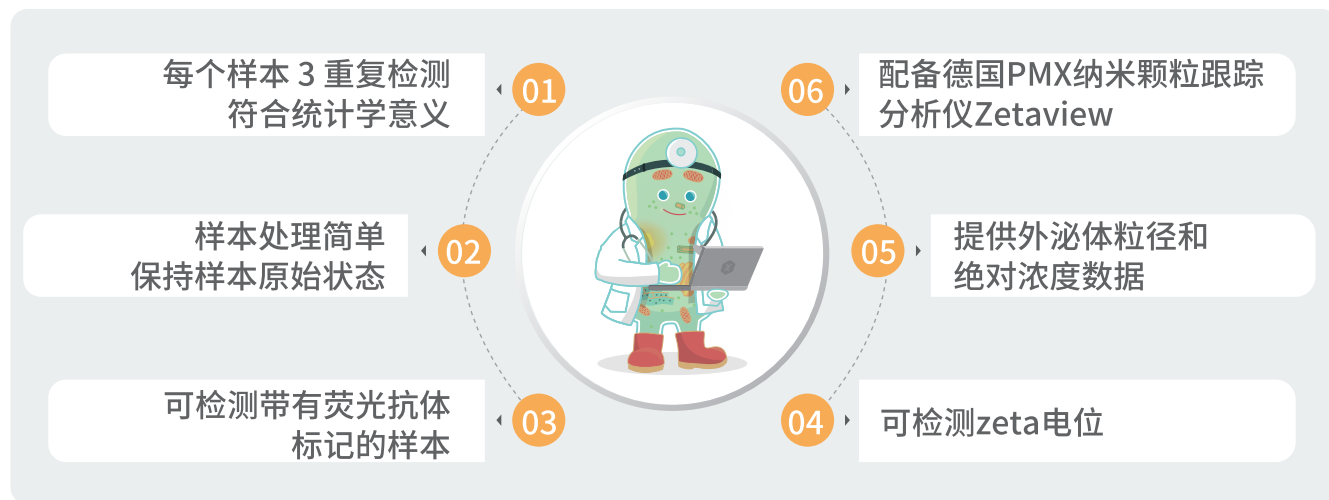

服务客户

20000+ 累计检测样本量

2000+ 累计合作客户

复旦大学、北京大学、清华大学、同济大学、东南大学、宁波大学、东北大学、山东大学、上海交通大学医学院、复旦大学附属华山医院、武汉大学中南医院、浙江大学附属第二医院、中南大学、中南大学湘雅医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、山东第一医科大学第一附属医院、安徽医科大学第一附属医院、内蒙古医科大学附属医院等



专业外泌体检测一站式服务

外泌体分离

- 样本类型广：上清、血清、血浆、牛奶、植物样本等
- 差速超速离心法，外泌体提取金标准
- 沉淀法与尺寸排除法，英国CGS Exo-spin 提取试剂盒，组合提取法，时间短、上样量大、得率高

外泌体鉴定

- 粒径、浓度NTA样本类型广（上清、血清、血浆、牛奶、植物样本等）
- 仪器：德国Zetaview, 每样本 3 重复检测，符合统计学意义
- 透射电镜 (TEM) 仪器：日本JEOL, JEM-1200EX, 提供8张图片
- 蛋白标志物检测 (WB)：提供 6种抗体指标 (CD9\CD63\CD81\TSG101\HSP70\Calnexin)

外泌体测序

- miRNA, illumina测序平台, 下机数据量10M reads (3G RAW)
- LncRNA, illumina测序平台, 下机数据量10G RAW

蛋白质组学

- 4D Label free, 基于4D分析方法对蛋白质进行的非标记定量
- TMT、iTRAQ, 同位素标记的相对与绝对定量蛋白质组学
- DIA, 数据非依赖性采集的非标记蛋白质组学

外泌体示踪

- 外泌体标记, PKH26或PKH67等染料进行外泌体荧光标记
- 外泌体体外示踪, 荧光外泌体与细胞共孵育后, 采用共聚焦显微镜进行拍摄
- 外泌体体内示踪, 荧光外泌体注射到小鼠体内后, 采用小动物活体成像系统进行拍摄



下单方式

关注道鹏微信公众号 (xpbiomed)



进入右下角“检测服务”



立即下单

*我公司郑重承诺：客户提供产品的检测信息与数据，履行保密义务，未经客户许可，不得擅自公开发表或使用，不得泄露给第三方。检测产品仅做数据统计及市场宣传材料用。

- 🏠 公司地址：上海市奉贤区汇丰西路2082号9号楼
- ☎ 咨询热线：400-820-3979
- ✉ 公司邮箱：info@xpbiomed.com
- 🌐 官方网址：www.xpbiomed.com

道鹏生物 官方微信

